



Vacuümtherapie

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
WAT IS VACUÛMTHERAPIE?	4
HOE WERKT VACUÛMTHERAPIE?	5
HOE WORDT EEN VACUÛMVERBAND AANGELEGD?	6
VRAGEN EN ANTWOORDEN	7
ALARMSIGNALLEN	10
VACUÛMTHERAPIE THUIS	12
CONTACTGEGEVENS	15

Uw arts heeft u vacuümtherapie voorgeschreven om de genezing van uw wonde te bevorderen. In deze brochure vindt u nuttige informatie over de werking en het gebruik van dit systeem.


WAT IS VACUÛMTHERAPIE?

Vacuümtherapie, ook negatieve druktherapie genoemd, is een systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van een vacuüm of gecontroleerde onderdruk om de wondgenezing te bevorderen.



HOE WERKT VACUÛMTHERAPIE?

Het vacuümtherapiesysteem bestaat uit een therapie-unit die door een computer wordt bestuurd, een opvangbeker, een steriele plastic slang, een foamverband en doorzichtig folieverband. Het foamverband, dat eruit ziet als een zwarte spons, wordt op of in de wonde aangebracht en afgesloten met een doorzichtige folie. Via een aanzuigpoort wordt de slang in verbinding gebracht met de spons. Het wondvocht wordt uit de wonde gezogen en opgevangen in de opvangbeker.

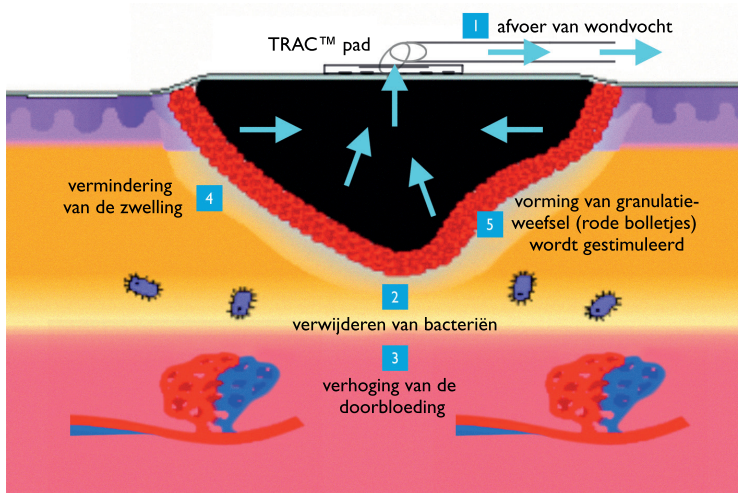


Het vacuümsysteem zuigt wondvocht **1** met eventuele bacteriën **2** uit de wonde en vangt deze op in de opvangbeker. Bovendien bevordert het vacuümsysteem de bloedcirculatie **3** en kan het de zwelling verminderen **4**, waardoor de wonde sneller geneest **5**.


HOE WORDT EEN VACUÛMVERBAND AANGELEGD?

De volgende afbeeldingen laten stap voor stap zien hoe de plaatsing van het verband gebeurt.



1 Na de reiniging van de wonde wordt het foamverband op maat van de wonde geknipt en in de wonde aangebracht.

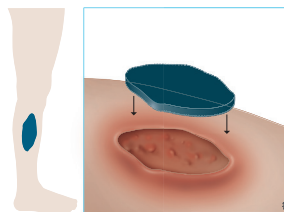


2 Het foamverband en de omgeving rond de wonde worden afgesloten met een doorzichtig folieverband. Op deze manier wordt de wonde luchtdicht afgesloten.

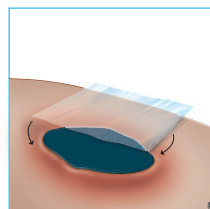

3 In de folie wordt een kleine opening gemaakt (zo groot als een muntstuk van twee euro) om het foamverband met de aanzuigpoort te kunnen verbinden.

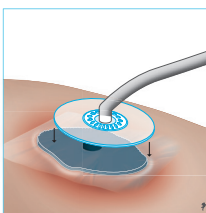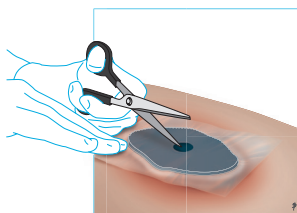

4 De vacuümunit wordt ingesteld en aangezet. Het verband zal zich geleidelijk luchtledig zuigen. U kunt dit merken doordat het verband hard gaat aanvoelen.

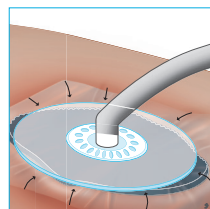

Wanneer het vacuümsysteem wordt aangezet, kunt u een licht trekkend gevoel ervaren dat meestal verdwijnt na 10 tot 15 minuten. In sommige gevallen kunt u een licht pijngevoel hebben. Als dit het geval is, kunt u aan uw behandelende arts vragen om de nodige pijnmedicatie voor te schrijven. Hoe u de behandeling ervaart, hangt af van patiënt tot patiënt.

Soms wordt de wonde gevoelig of ontstaat er jeuk tijdens het genezingsproces. Gewoonlijk is dit een goed teken. Neem contact op met uw arts of zorgverlener als de jeuk of het ongemak blijft bestaan.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoe lang heb ik vacuümtherapie nodig?

De duur van de vacuümtherapie hangt af van het type en de ernst van uw wonde, van het genezingsvermogen van uw lichaam en van het gewenste resultaat. Uw arts beslist of uw wonde helemaal gesloten moet worden of moet worden voorbereid voor een huidflap of huident. Om uw wondgenezing niet te belemmeren, is het belangrijk dat u het advies van uw arts goed opvolgt.

Hoeveel uur per dag moet het vacuümsysteem ingeschakeld zijn?

De vacuümtherapie moet 24 uur per dag ingeschakeld zijn. Anders profiteert de wonde niet van de optimale werking en bestaat er een groter risico op complicaties. Als u het systeem langer dan twee uur moet uitschakelen, raadpleegt u best zo snel mogelijk uw arts of zorgverlener.

Als het systeem langer dan vijftien minuten is uitgeschakeld, klinkt er een alarm. Druk op de knop om het alarm uit te schakelen als u meer tijd nodig hebt, maar beperk dit tot een minimum.

Hoe vaak moet het vacuümverband vervangen worden?

Het vacuümverband wordt best tweemaal per week vervangen. Dit is afhankelijk van het type, de grootte en de plaats van uw wonde. Uw arts of zorgverlener zal met u het juiste schema voor de verbandwissels bepalen.

Is het vervangen van het verband pijnlijk?

Sommige mensen ervaren ongemak tijdens de verbandwissel, afhankelijk van het type wonde, de plaats ervan en uw gezondheidstoestand. Uw arts of zorgverlener kan u advies geven over pijnverlichting.

Hoe ziet het vacuümverband eruit tijdens de vacuümtherapie?

Het vacuümverband of foamverband wordt samengedrukt tijdens de therapie. U zult zien dat het foamverband 'kreukt' en hard aanvoelt als de therapie is ingeschakeld. Als u vaststelt dat het verband soepel en zacht wordt, is er iets fout met de therapie (zie 'alarmsignalen').

Kan ik rondlopen tijdens de vacuümtherapie?

Dit is afhankelijk van de plaats van de wonde en de behandeling die uw arts heeft voorgeschreven. Maar in de meeste gevallen kunt u in

dezelfde mate bewegen als voor de therapie. U moet er wel voor zorgen dat de batterij van uw toestel altijd voldoende is opgeladen.

Moet het vacuümtoestel altijd rechtop staan?

Het is aangeraden de vacuümpomp altijd rechtop of verticaal te houden. Dit kan door het toestel met de ophanghaak te bevestigen aan een stoel of bed. Ook met een draagbaar systeem moet u de vacuümpomp altijd verticaal houden om te voorkomen dat de gecollecteerde vloeistof niet in de filter van de opvangbeker komt.

Mag ik mij wassen met het vacuümverband?

De doorzichtige folie is waterdicht. U kunt zich wassen of douchen met het verband op de wonde en de slang dichtgeklemd, als u ervoor zorgt dat het verband er niet afweekt. Hou het toestel zo ver mogelijk van de waterbron. Sluit wel zo snel mogelijk de vacuümpomp terug aan.

Als de folie vuil wordt, kunt u deze voorzichtig wassen met water en een zachte zeep.

Zolang het vacuümverband aanwezig is, kunt u geen bad nemen.

Is vacuümtherapie veilig?

Ja. Hospithera, de firma waarmee samengewerkt wordt voor vacuümtherapie, heeft dit systeem geleverd aan duizenden patiënten met acute en chronische wonden. Vacuümtherapie is een uitstekende methode om wondgenezing te bevorderen. Met de innovatieve TRAC-technologie (therapeutic regulated accurate care) kan de arts of zorgverlener de vacuümtherapie, die op uw wonde wordt toegepast, zo regelen dat een gecontroleerde, consistente en daardoor veilige therapie wordt gegarandeerd.

ALARMSIGNALEN

Het vacuümsysteem heeft hoorbare en zichtbare alarmsignalen die de aard van het probleem beschrijven. De meeste problemen kunnen gemakkelijk worden opgelost. Als u in het ziekenhuis verblijft, verwittigt u best zo snel mogelijk uw zorgverlener. Als deze problemen zich thuis voordoen, kunt u aan de hand van de volgende richtlijnen eerst zelf proberen het probleem op te lossen.



X Opvangbeker is vol

Dit hoorbare alarm wordt gegeven zodra de opvangbeker vol is, of de slang geknikt of verstopt is. Vervang de opvangbeker als deze vol is.

X Lekkage

U kunt een fluitend geluid horen wanneer er lucht vanonder de folie komt. De lekkage treedt vaak rond de slang op. Repareer het lek in de folie met een nieuw stuk folie.

X Batterij is bijna leeg

Laad de lege batterij op door de stekker in het stopcontact te steken.

X De therapie is niet geactiveerd. De stroom staat aan, maar de therapie niet.

Druk op de aan-/uitknop van de therapie.

Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de service-


centrale van Hospithera. Zij staan 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor telefonische ondersteuning. U kan hen bereiken op het telefoonnummer 02 535 03 95.

Als het probleem dan nog niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw behandelende arts in het ziekenhuis.

ActiV.A.C.®



Raadpleeg de ActiV.A.C.® gebruikershandleiding en de folder met veiligheidsinformatie, voor verdere informatie voor de bediening van de ActiV.A.C.® unit.

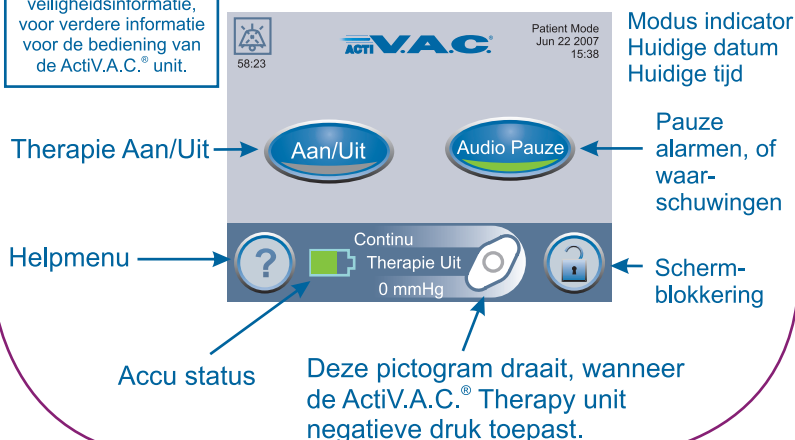

Starten met V.A.C.[®] Therapy

Druk  2 seconden om het systeem in/ uit te schakelen.

Druk  om de V.A.C.[®] Therapy te Starten of beeindigen.


 Een groen oplichtende balk op de Aan/Uit knop geeft aan dat therapie actief is.

Opvangbeker verwijderen

- Druk op de hendel van de opvangbeker om deze los te maken.
- Verwijder de opvangbeker en deponeer deze volgens de richtlijnen.

Opvangbeker installeren

- Bevestig de opvangbeker aan de unit.
- Druk de opvangbeker stevig vast, totdat een duidelijke klik hoorbaar is.

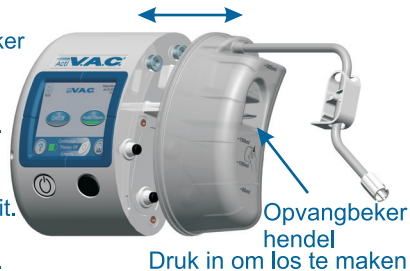

Alarmen en waarschuwingen

Druk  voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere details.

Bij geval van nood, neem alstublieft contact op met uw zorgverlener, of uw behandelend arts.

Dit is niet een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Voor aanvullende informatie met betrekking tot het gebruik van het ActiVAC[®] systeem raadpleeg uw ActiVAC[®] gebruikershandleiding en neem contact op met uw zorgverlener, behandelend arts, of KCI Medical B.V.



KCI USA, INC.
San Antonio, Texas 78219 USA
www.kci1.com



EC REP

KCI Medical Products (UK), Ltd.
Wimborne, Dorset
BH21 7SH
United Kingdom
www.kci-medical.com

Trademarks designated herein are proprietary to KCI Licensing, Inc. and its affiliates. Trademarks designated with the "®" symbol are registered in at least one country where this product is commercialized, but not necessarily in all such countries. The V.A.C.[®] System is patented and/or subject to pending patent.
©2007 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. 340091-05 Rev A 07/07



VACUÛMTHERAPIE THUIS

Samen met de arts, hoofdverpleegkundige en sociaal werker kijken we of u uw vacuümtherapie eventueel thuis kan verderzetten. Volgende criteria moeten positief beantwoord worden:

- Wordt de vacuümtherapie momenteel met succes in het ziekenhuis toegepast?
- Moet u alleen voor de vacuümtherapie in het ziekenhuis blijven?
- Is de wonde niet te groot of complex om met vacuümtherapie thuis te behandelen?
- Bent u bereid om met deze vacuümtherapie naar huis te gaan?
- Kunt u zelf of iemand in uw omgeving de therapie goed opvolgen en ingrijpen bij eventuele alarmsignalen?
- Bent u in staat om de vacuümpomp op een verantwoorde en zorgvuldige manier te gebruiken?
- Beschikt u over voldoende hulp voor ondersteuning en transport naar het ziekenhuis voor de verbandwissels?

Als u volgens deze criteria in aanmerking komt voor vacuümtherapie thuis, kan u een toestel van UZ Leuven voor maximum zes weken ter beschikking krijgen. U ondertekent hiervoor een document met de verklaring het toestel in goede staat terug in te leveren.

De vacuümunit moet immers met de juiste zorg en voorzichtigheid gebruikt worden, zodat deze niet beschadigd wordt. Als er beschadigingen aan het toestel worden vastgesteld die te wijten zijn aan onzorgvuldig gedrag, kunnen deze kosten aan u verhaald worden. Na het beëindigen van de behandeling brengt u de vacuümpomp (met bijbehorende oplaadstekkers en koffer) zo snel mogelijk in een hygiënisch propere toestand terug naar het wondzorg supportteam van UZ Leuven. Dit kan eventueel via de raadpleging.

Voor de verbandwissels komt u tweemaal per week naar het ziekenhuis. De verbandwissels gebeuren op de raadpleging heelkunde door de handelende arts. Deze geeft u hiervoor ook de nodige afspraken mee.

Per verbandwissel wordt buiten het remgeld voor de raadpleging een kost van 40 euro aangerekend voor de gebruikte materialen en de pomp.

In sommige gevallen kunt u voor de verbandwissels ook een beroep doen op een thuisverpleegkundige die gespecialiseerd is in vacuümtherapie. Het materiaal moet/kan besteld worden via Wameda. U krijgt een lijst met het benodigde materiaal mee naar huis.

Om de vacuümtherapie bij u thuis vlot te laten verlopen, kan uw thuisverpleegkundige volgende punten dagelijks mee opvolgen:

- ✓ Controleren of het verband nog onder vacuüm staat. Het verband moet dan hard aanvoelen.
- ✓ Controleren van het verband op lucht- en vochtlekken of overmatige bloeding onder de folie.
- ✓ Controleren van het vocht in de opvangbeker: verandert de kleur en samenstelling van de vloeistof?
- ✓ Controleren of alle klemmen op de leidingen openstaan.
- ✓ Controleren van het toestel op volgende punten:
 - Het schroefje moet altijd draaien. Dit wil zeggen dat het toestel functioneert.
 - De batterij moet zoveel mogelijk groen gekleurd zijn. Als de batterij niet volledig groen gekleurd is, schakelt u het toestel terug aan op de netstroom.
 - De druk staat op de ingestelde waarde. Meestal is dit '125 mm/Hg' en 'continue druk'.
 - Het toestel staat op vergrendeld, zodat het niet per ongeluk kan uitschakelen. U kunt dit zien door 'schermbeveiliging met cijfer 1 en 2'. Als het toestel niet geblokkeerd staat, klikt u best op het slotje rechts onderaan om het toestel terug te vergrendelen.

CONTACTGEGEVENS

Hospithera: tel. 02 535 03 95
info.woundcare@hospithera.com

Eenheid UZ Leuven: tel. 016 34
Wondzorg supportteam UZ Leuven: tel. 016 34 11 27
Raadpleging heelkunde UZ Leuven: tel. 016 34 48 50

Wameda (bestelling materiaal): tel. 03 369 94 30
fax 03 296 49 68
wameda@wameda.be

Thuisverpleging:

.....

Naam behandelende arts:

.....

Afspraken raadpleging heelkunde:

..... dag .. / .. /20 ..

..... dag .. / .. /20 ..

..... dag .. / .. /20 ..

..... dag .. / .. /20 ..

..... dag .. / .. /20 ..

..... dag .. / .. /20 ..

..... dag .. / .. /20 ..

© juni 2018 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door het wondzorg support team in samenwerking met de dienst communicatie UZ Leuven.

Deze brochure kwam tot stand met de hulp van KCI Medical.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700512.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth

Raadpleeg uw
medisch dossier via
www.mynexuzhealth.be of

