



Keel- en oppervlakkige neuswisser

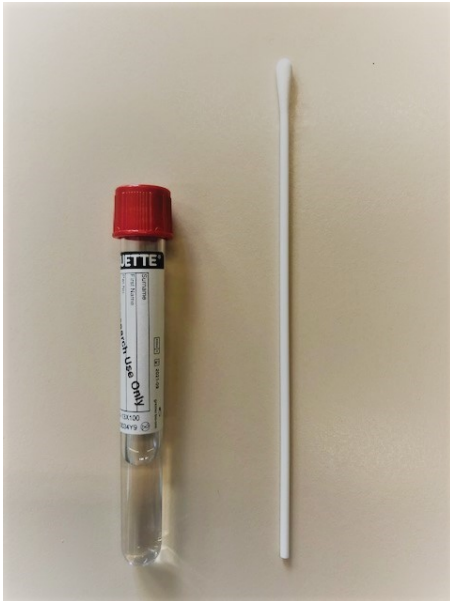

Deze wissers kunnen **niet** gebruikt worden voor **nasofaryngeale** afname!! De wisser is niet flexibel genoeg!!

1. Laat de patiënt comfortabel plaatsnemen, buig het hoofd lichtjes naar achter.
2. Neem de wisser uit de verpakking (apart verpakt).
3. Druk de tong goed naar beneden met een houten spatel.
4. Instrueer de patiënt 'Ah' te zeggen, zodat de huig wordt verheven.
5. strijk langs de achterwand van de keel (2-3 tal keer) (pijltjes foto).
Doe dit links en rechts.

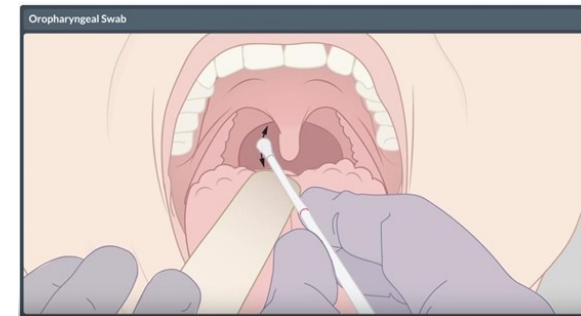

5. Breng vervolgens dezelfde wisser achtereenvolgens in het rechter en linker neusgat. Hou deze horizontaal en stop van zodra je lichte weerstand voelt. (**niet tot in de nasofarynx!**)
6. Draai **3** keer rond in elke neusgat.
7. Open de tube. Knip de wisser af en plaats de wisser in de tube. Sluit de tube goed af!
8. Breng de patiëntengegevens aan op de tube.