



Infusor[®]: toediening van antibiotica met een infuuspomp

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
HOE VERLOOPT UW THERAPIE MET EEN INFUSOR®?	4
HOE ZIET EEN INFUSOR® ERUIT?	5
HOE WEET U THUIS OF DE TOEDIENING VERLOOPT ZOALS GEPLAND?	6
WAAR MOET U THUIS OP LETTEN TIJDENS UW BEHANDELING MET EEN INFUSOR®?	6
WAT IS HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN WANNEER U EEN BEHANDELING KRIJGT MET EEN INFUSOR®?	9
WAT DOET U WANNEER U THUIS EEN PROBLEEM ERVAART TIJDENS DE BEHANDELING?	10
Het lijkt alsof de Infusor® steeds even vol blijft	
Er lijkt vloeistof te lekken	
HOE LANG DUURT UW BEHANDELING MET EEN INFUSOR®?	13
HOE WEET U WANNEER UW INFUSOR® LEEG IS?	13
WAT MOET ER GEBEUREN WANNEER DE INFUSOR® LEEG IS?	14
NUTTIGE CONTACTGEGEVENS	15

Sommige behandelingen met antibiotica worden toegediend met behulp van een Infusor[®], ook wel infuuspomp genoemd.

In deze brochure wordt u uitgelegd hoe een behandeling met een Infusor[®] verloopt, waarop u thuis moet letten wanneer u een behandeling krijgt toegediend via een Infusor[®] en wat u kunt doen bij problemen.

Bij vragen of problemen: neem contact op met de OPAT-coach van de hospitalisatieafdeling waar u behandeld wordt of de OPAT-verantwoordelijke van het ziekenhuis (zie verder bij nuttige contactgegevens).

HOE VERLOOPT UW THERAPIE MET EEN INFUSOR®?


De antibioticatherapie wordt opgestart tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. De verderzetting van de therapie met de Infusor® gebeurt thuis.

Een- of tweemaal per dag zal uw thuisverpleegkundige de Infusor® met antibioticum thuis bereiden en aanschakelen aan uw katheter.

De Infusor® zal uw therapie geleidelijk en aan de juiste snelheid toedienen. Die gedoseerde toediening zorgt voor een optimale dosering van de therapie en beperkt de nevenwerkingen.

Omdat een Infusor® een kleine, draagbare fles is, kunt u uw dagelijkse activiteiten voor een groot deel blijven uitvoeren tijdens uw behandeling.

HOE ZIET EEN INFUSOR[®] ERUIT?

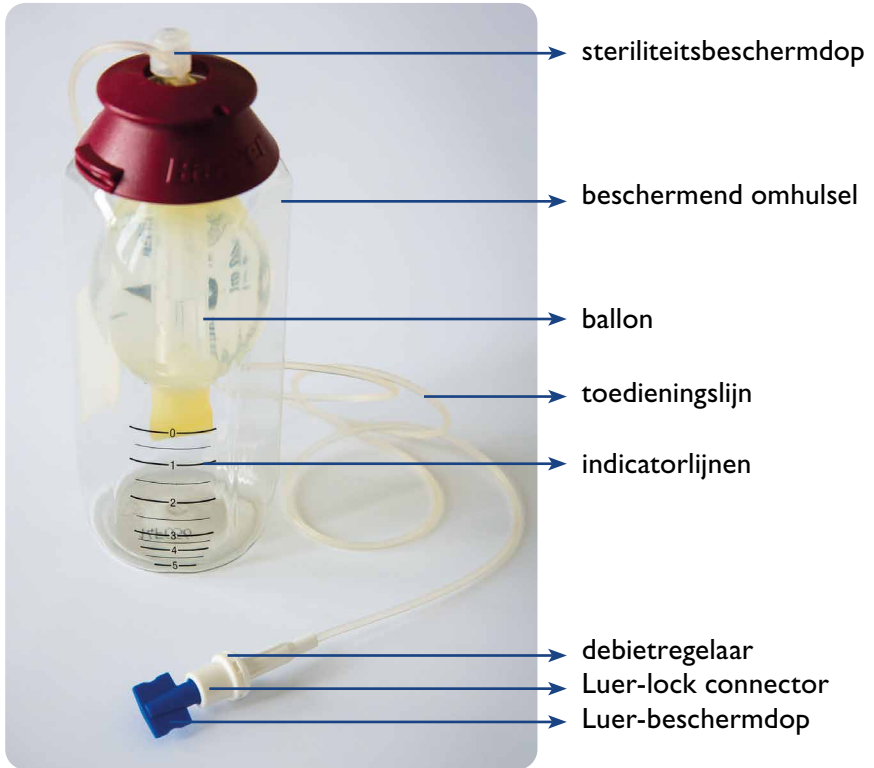

HOE WEET U THUIS OF DE TOEDIENING VERLOOPT ZOALS GEPLAND?

In de Infusor[®] zit een ballon met daarin uw antibiotica. U zult zien dat de ballon in de Infusor[®] bij het aanschakelen volledig gevuld is met vloeistof en een beetje lucht (zoals op de foto op de vorige pagina).

Vanaf het ogenblik dat de Infusor[®] aangesloten wordt op uw katheter, zal deze ballon langzaam leeglopen. Afhankelijk van uw behandeling zal dit 12 uur of 24 uur duren. Uw arts en verpleegkundige in het ziekenhuis informeren u hierover.


U kunt zelf controleren of de Infusor[®] aan de juiste snelheid loopt door te kijken naar de indicatorlijnen op het omhulsel (zie de voorgaande foto).

WAAR MOET U THUIS OP LETTEN TIJDENS UW BEHANDELING MET EEN INFUSOR[®]?

- ✗ In het ziekenhuis krijgt u een **buideltasje** waarin u uw Infusor[®] kunt bewaren. U kunt het tasje rond de hals of rond de lenden bevestigen, zoals u ziet op de foto. U kunt het tasje ook in een binnenzak of grote broekzak opbergen. Zo voorkomt u dat de infuus pomp op de grond valt.
- ✗ Let erop dat **de leiding** mooi opgerold is en dat ze nergens achter kan haken (bijvoorbeeld achter een deurklink of stoel). Dit voorkomt trekkracht op de leiding of op de poortkatheternaald als er een poortkatheter is.



Door te grote trekkracht kan de leiding beschadigd raken, kan de PICC-katheter loskomen of kan de naald uit de poortkatheter komen. Zo kan er vloeistof lekken.

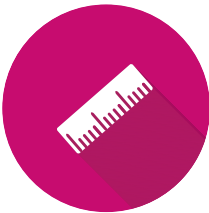


X Zorg ervoor dat het **hoogteverschil** tussen de Infusor[®] en de katheter ongeveer hetzelfde blijft. Dat zorgt ervoor dat de vloeistof in de Infusor[®] continu aan dezelfde snelheid kan inlopen. 's Nachts legt u de Infusor[®] naast u in bed of eventueel onder het hoofdkussen. Leg hem liever niet op een nachtkastje of op de grond.



X De **snelheidsregelaar** van de Infusor[®] wordt aangedreven door uw **lichaamstemperatuur**. De thuisverpleegkundige zal de snelheidsregelaar van de Infusor[®] op uw huid vastkleven. Zorg ervoor dat de snelheidsregelaar op uw huid bevestigd blijft en dat de Infusor[®] geen al te grote temperatuurverschillen

ondergaat. Ook dat is belangrijk voor een constante inloopsnelheid. Temperaturen boven de 38°C (zoals in de vlakke zon) en vrieskou zijn te vermijden. In de winter draagt u de Infusor® het best dicht tegen uw lichaam.

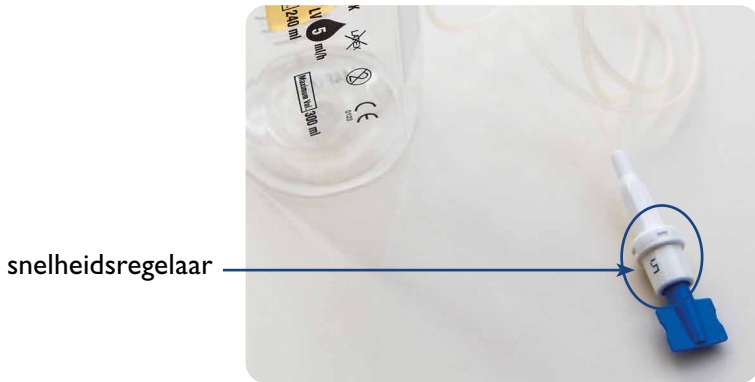

X Zorg ervoor dat de Infusor® niet in contact komt met **water**. Berg de Infusor® op in een plastic verpakking tijdens het douchen. Dompel de Infusor® niet onder in water.

X Zorg ervoor dat het **verband op de katheter** goed gefixeerd blijft en droog blijft. De (thuis)verpleegkundige zal het insteekpunt van uw katheter of de poortkatheternaald afdekken met een steriel verband. Controleer regelmatig of het verband en de pleister nog goed vastzitten. Gebruik bij voorkeur een plastic verband wanneer u een bad of douche wilt nemen.



X U kunt **sporten (wandelen, rustig fietsen ...)** en **reizen** met een Infusor®. Houd er wel rekening mee dat u de infuuspomp droog moet houden en niet aan extreme temperaturen mag blootstellen. Wanneer u een poortka-

theter hebt, wees dan voorzichtig met heftige bewegingen van het bovenlichaam. Hierdoor zou de poortkatheternaald kunnen loskomen.

WAT IS HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN WANNEER U EEN BEHANDELING KRIJGT MET EEN INFUSOR®?



Omdat u thuis bent tijdens uw behandeling met een Infusor®, is het goed om **verzorgingsmateriaal** in huis te hebben:

- Ontsmettingsmiddel: chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%
- Steriele kompressen
- Steriel verband

U krijgt al het bovenstaande verzorgingsmateriaal mee bij uw ontslag uit het ziekenhuis.

WAT DOET U WANNEER U THUIS EEN PROBLEEM ERVAART TIJDENS DE BEHANDELING?

HET LIJKT ALSOF DE INFUSOR® ALTIJD EVEN VOL BLIJFT

- X Ga aan de hand van de indicatorlijnen van de Infusor® na of die aan de gewenste snelheid loopt.
- X Als de Infusor® niet aan de gewenste snelheid loopt:

- Er is maar een kleine kans dat een **knik in de infuusleiding** de toediening van de medicatie tegenhoudt. Wanneer de vloeistof niet wordt toegediend, controleer dan toch of er een knik in de leiding zit en verwijder de knik zo nodig.
- Controleer of **de leiding afgesloten wordt door de klem**. Wanneer de leiding gesloten is, dan opent u de klem.



De leiding wordt afgesloten door de klem.



De leiding wordt niet afgesloten door de klem.

- Controleer of u **bloed** ziet in de **leiding**. Dat zou moeten weggaan door het verwijderen van de knik uit de leiding of het openen van de klem.
- X Als u daarna nog altijd de indruk hebt dat de Infusor® even vol blijft, contacteer dan het ziekenhuis of de thuisverpleegkundige.

ER LIJKT VLOEISTOF TE LEKKEN

- ✗ U merkt dit op als het verband op de katheter vochtig wordt of als u natte vlekken op uw kleding of huid ervaart.
- ✗ Er kan vloeistof lekken op verschillende plaatsen van het systeem. Ga eerst na **waar** het systeem lekt.

a) Er lekt vloeistof aan de poortkatheternaald of aan het insteekpunt van de PICC-katheter.

- ✓ Sluit de klem op de leiding.
- ✓ Plaats een leiding van een PICC-katheter of een poortkatheternaald **NOOIT** zelf terug. Ontsmet uw huid met een steriel kompres met chloorhexidine 0,5% en dek uw huid af met een steriel verband.
- ✓ Contacteer uw thuisverpleegkundige of het ziekenhuis.

b) Er lekt vloeistof aan van de verbinding tussen de leiding van uw katheter en de leiding van uw Infusor®.

- ✓ De verbinding is **volledig** losgekomen:
 - Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze grondig.
 - Sluit de klem op de poort- of PICC-katheter.
 - Ontsmet de uiteinden van beide leidingen met een alcoholoplossing 70%.
 - Verbind de leidingen terug.
 - Contacteer het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.

- ✓ De verbinding is **niet volledig** losgekomen:
 - Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze grondig.
 - Neem een steriel kompres, bevochtig het met een alcoholoplossing 70% en houd het onder de verbinding tussen de twee leidingen.
 - Probeer de verbinding iets vaster te draaien.
 - Was uw handen.
 - Controleer of er nadien nog vloeistof lekt.
 - Wanneer het probleem niet is opgelost, contacteer dan het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.

**c) Er lekt vloeistof aan de leiding
(de leiding lijkt stuk of is doorgeknipt).**

- ✓ Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze grondig.
- ✓ Sluit de klem op de katheter.
- ✓ Berg de Infusor[®] op in een goed afgesloten zak.
- ✓ Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.

d) De Infusor[®] is stuk.

- ✓ Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze grondig.
- ✓ Sluit de klem op de katheter.
- ✓ Stop de Infusor[®] in een plastic zak.
- ✓ Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.

Bij vragen of problemen: neem contact op met de OPAT-coach van de hospitalisatieafdeling waar u behandeld wordt of de OPAT-verantwoordelijke van het ziekenhuis (zie verder bij nuttige contactgegevens).

HOE LANG DUURT UW BEHANDELING MET EEN INFUSOR®?

De totale duur van uw therapie is afhankelijk van het type infectie en van hoelang u in het ziekenhuis reeds antibioticumtherapie hebt gekregen.

De duur van uw behandeling zal duidelijk naar u gecommuniceerd worden door uw behandelende zorgverleners in het ziekenhuis.

HOE WEET U WANNEER UW INFUSOR® LEEG IS?

In het ziekenhuis zullen de zorgverleners u vooraf vertellen hoelang één Infusor® loopt. Die looptijd zal 12 of 24 uur bedragen, afhankelijk van het soort antibioticum waarmee u behandeld wordt. Vraag uw thuisverpleegkundige om het uur waarop de toediening start te noteren op de Infusor®.

De Infusor® is volledig leeg wanneer u acht verhevenheden ('bobbels') ziet op de lege ballon.

WAT MOET ER GEBEUREN WANNEER DE INFUSOR[®] LEEG IS?

Wanneer uw Infusor[®] leeg is, zal die afgekoppeld worden van uw katheter. Dat gebeurt door uw thuisverpleegkundige.

Na het afkoppelen van de Infusor[®] zal uw thuisverpleegkundige een nieuwe Infusor[®] bereiden en aan uw katheter koppelen, zolang u nog verder behandeld moet worden met het antibioticum.

Uw thuisverpleegkundige vindt meer informatie over het afkoppelen en het bereiden van een nieuwe Infusor[®] in de bijgevoegde bereidingsprocedure voor de thuisverpleegkundige.

Al het materiaal dat uw thuisverpleegkundige nodig heeft voor het afkoppelen van de lege Infusor[®] en het bereiden en aankoppelen van een nieuwe Infusor[®] wordt voorzien door de ziekenhuisapotheek. U krijgt dat verzorgingsmateriaal mee bij uw ontslag uit het ziekenhuis.

In het geval van een langdurige thuisbehandeling met antibioticumtherapie is het mogelijk dat niet al het materiaal voor de volledige duur van de behandeling in één keer kan meegegeven worden. Mogelijk moet u dan in de loop van uw thuisbehandeling een of meerdere extra pakketten met materiaal in de ziekenhuisapotheek komen ophalen. Dat zal duidelijk naar u gecommuniceerd worden door uw behandelende zorgverleners in het ziekenhuis. U vindt de ziekenhuisapotheek op campus Gasthuisberg, via de bruine pijl, 2e verdieping.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

- ✓ OPAT-coach van de hospitalisatieafdeling (indien van toepassing):
 - Telefonisch: vraag de OPAT-coach van uw hospitalisatieafdeling op welk nummer hij of zij bereikbaar is op werkdagen.

- ✓ OPAT-verantwoordelijke van het ziekenhuis:
 - Telefonisch: +32 16 34 32 74 (bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op werkdagen)
 - Via mail: OPAT@uzleuven.be. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord, maar dit kan tot 48 uur duren. De mail wordt niet gelezen tijdens het weekend.

U vindt deze brochure ook op
www.uzleuven.be/brochure/700821.

© september 2020 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de ziekenhuisapotheek in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700821.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

