

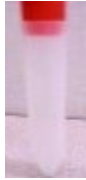



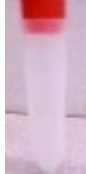


## Afnametabel

Staal	Hoeveelheid	Receptiënt	Fixatie	Bewaring na fixatie	Gedroogd preparaat	Opmerking
Stalen van de urinewegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ urine</li> <li>○ blaasspoeling</li> <li>○ ureterspoeling</li> <li>○ urethraspoeling</li> </ul>	zie <a href="#">link</a>	Cytolyt® buis 	zie <a href="#">link</a>	zie <a href="#">link</a>	Geen	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Midstream urine</li> <li>○ Geen ochtend urine</li> </ul>
Sputum	20 ml	Vorgevuld potje (oranje deksel)	Gebufferde formaldehyde 4% Zelfde hoeveelheid als het staal dat aanwezig is in het receptiënt (verhouding ½).	14 dagen op kamertemperatuur	Geen	
Stalen van de luchtwegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bronchus-aspiraats</li> <li>○ BAL (bronchoalveolaire lavage)</li> <li>○ bronchus-borsteling</li> </ul>	10 ml	Langwerpige potje met deksel 	Cytorich® RED Preservative Zelfde hoeveelheid als het staal dat aanwezig is in het receptiënt (verhouding ½).	4 weken op kamertemperatuur	Geen	

<p>Vochten (pleuravocht, pericardvocht, ascitesvocht, peroperatieve spoelvochten van thoraxholte, peritoneale holte, douglasvocht)</p> <p>Van enkele vochten kan ook een grotere hoeveelheid opgestuurd worden voor het maken van een celblok. vermelden op aanvraagformulier</p>	10 ml	<p>Centrifugeerbuisje met stop</p> 	Het staal zo snel mogelijk vers naar het labo verzenden		Geen	Het staal zo snel mogelijk vers naar het labo verzenden
<p>Borstelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ galwegen</li> <li>○ pancreaswegen</li> <li>○ papil van Vater</li> </ul>	10 ml	<p>Sterilin Potje</p> 	Cytorich® RED Preservative in een bodempje van ± 1 cm	4 weken op kamertemperatuur	Geen	Borsteltje fixeren in recipiënt met fixatief
<p>Fijne naald aspiraties van letsels in borst, long, maag, slokdarm, subcutis, schildklier</p>	10 ml	<p>Sterilin Potje</p> 	Cytorich® RED Preservative in een bodempje van ± 1 cm	4 weken op kamertemperatuur	Geen	Afnamespuit uitspoelen met fixatievloeistof

<p>Fijne naald aspiraties van letsels in speekselklieren, lymfeklieren</p>	<p>10 ml</p>	<p>Sterilin Potje</p> 	<p>Cytorich® RED Preservative in een bodempje van ± 1 cm</p>	<p>4 weken op kamertemperatuur</p>	<p>geen</p>	<p>Afnamespuit uitspoelen met fixatievloeistof</p>
<p>Lumbaalvochten</p>		<p>Centrifugeerbuisje met stop</p> 	<p>Vers gekoeld of onmiddellijk gefixeerd in centrifugeerbuisje met Cytorich® RED Preservative</p>		<p>Geen</p>	<p>Het staal zo snel mogelijk gekoeld naar het labo verzenden</p>